



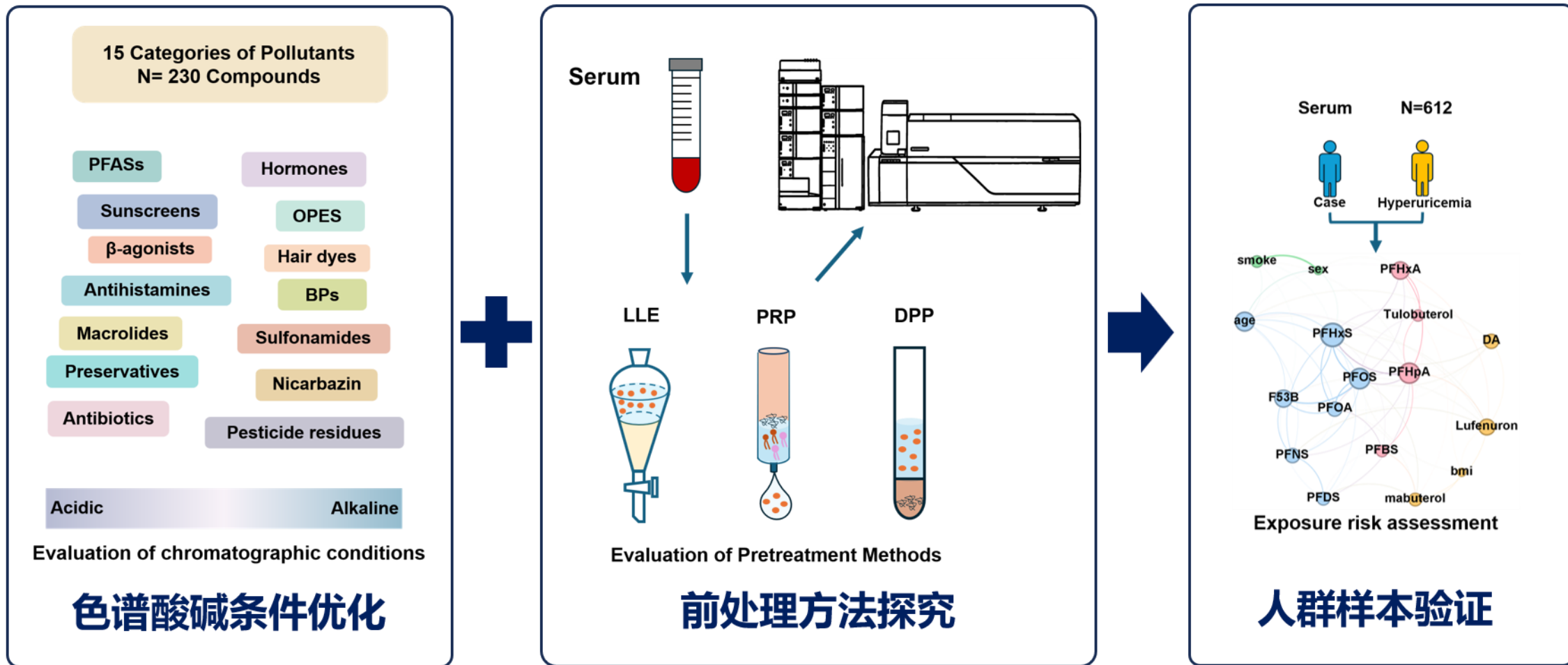


为了实现多污染物检测，探究合适的前处理方法与色谱条件


目前已经验证污染物超过390种，包括47种全氟污染物

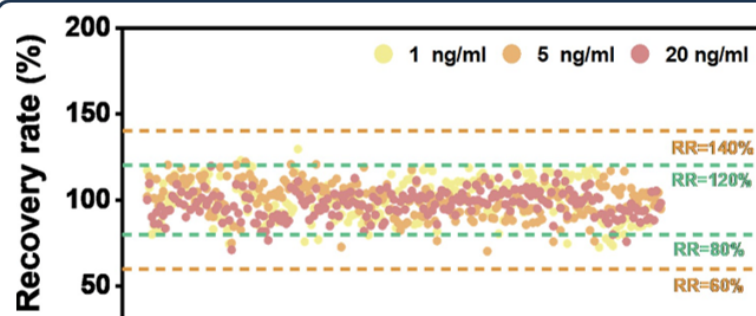

Pollution substances


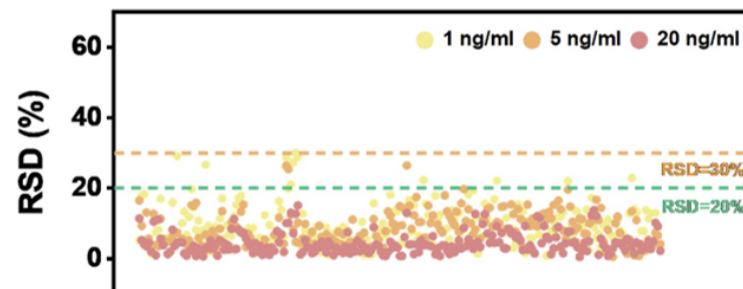


Pollution substances

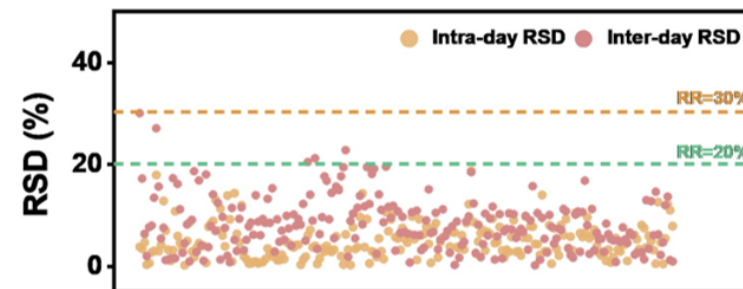

Pollution substances

以胎牛血清为基质，在最优前处理及色谱条件下，验证230种污染物在低、中、高三个浓度下
回收率 (80%~120%) 和精密度 ($RSD < 20\%$)，满足精准检测要求

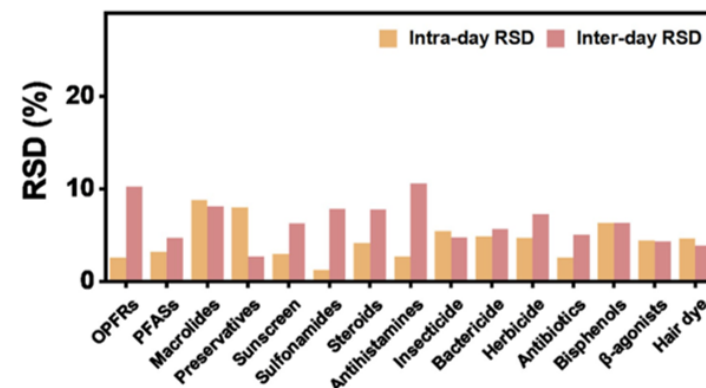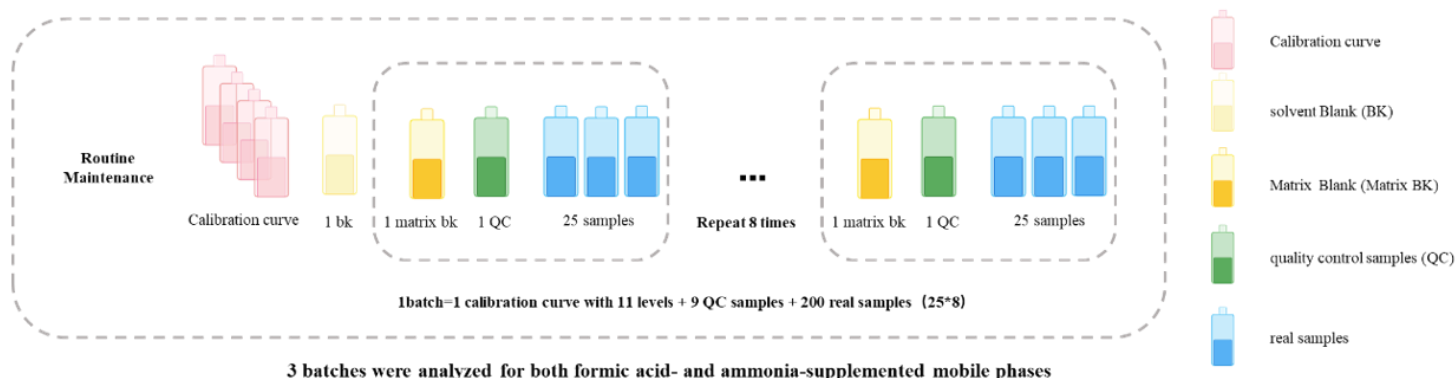

检测过程设置多个质量控制样本，超过600个样本的检测日内和日间精密度良好 ($RSD < 20\%$)

Schematic diagram of different extraction methods



Solvent recovery experiments use 50% methanol

Matrix effect experiments use fetal bovine serum

Simulated samples Spiked with target standards

Population samples Contained internal standard (IS)

Protein precipitation using organic solvents

Complete precipitation

Analyze the supernatant directly after centrifugation

DPP

Depletion of phospholipids and analysis

PRP

4°C concentration reconstitution system and analysis

PPVCC

Extraction three times

collection of the organic phase

4°C concentration reconstitution system and analysis

LLE

